



THUASNE®

Osteoarthritis

UltraLight térdrögzítő

Ízületi fájdalom és merevség

Tehermentesítő
térdrögzítő⁽¹⁾, amely
enyhíti a fájdalmat és
megkönnyíti a mozgást



Érezze újra a mozgás szabadságát!

Az **X-alakú TensionStrap rendszer** célzott, rugalmas ellenállási erőt fejt ki, hogy csökkentse a térd fájdalmas területére nehezedő nyomást.


- Segít a porckopás okozta **fájdalom enyhítésében**⁽¹⁾.
- **Támaszt nyújt az ízületnek**⁽¹⁾.
- **Dinamikus működési elv.**

Indikáció : Enyehe egyrekeszes femorotibiális térdízület artrózis.

⁽¹⁾OC2301 - A térdörögzőt házon belüli vizsgálati jelentése




Integrált X-alakú TensionStrap rendszer

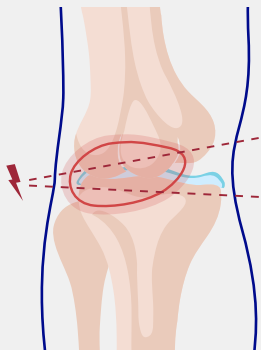

A térd osteoarthritis

Térdízületi osteoarthritis esetén a porc fokozatos károsodása az ízületi rés beszűküléséhez vezet. Ennek következtében a csontvégek rendellenes és fájdalmas érintkezése alakul ki, amely ízületi merevséget és mozgáskorlátozottságot okoz.

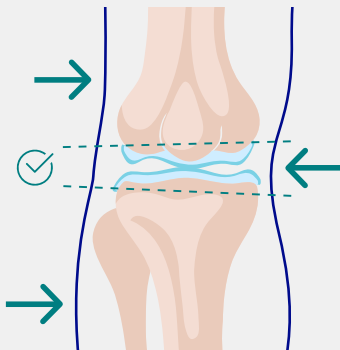

Az Osteoarthritis UltraLight térdrögzítő hatásmechanizmusa

A Thuasne® X-alakú TensionStrap rendszere célzott oldalirányú erőt fejt ki, amely a terhelés áthelyezésével csökkenti a fájdalmas ízületi részre jutó nyomást, ezáltal pedig mérsékli a fájdalmat és javítja a térdízület mozgását.



Mozgásra tervezve: járás vagy mozgás során fejt ki a leghatékonyabban hatását. Kényelme érdekében ülő helyzetben csak korlátozott ideig viselje a rögzítőt.

A megfelelő rögzítő kiválasztása

Térdrögzítő A

	1 A	41 - 45 cm
	2 A	45 - 50 cm
	3 A	50 - 55 cm
	4 A	55 - 61 cm

Keresse meg a fájdalom helyét az ábrán és válassza ki a megfelelő térdrögzítőt

Térdrögzítő B

	1 B	41 - 45 cm
	2 B <td>45 - 50 cm</td>	45 - 50 cm
	3 B <td>50 - 55 cm</td>	50 - 55 cm
	4 B <td>55 - 61 cm</td>	55 - 61 cm

Referencia: OR-260001. - Utoljára aktualizálva: 2026-03. A dokumentumban szereplő I. osztályú orvostechnikai eszköz CE-jelöléssel rendelkezik a 2017/745 európai rendelet szerint. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Forgalmazó: Thuasne Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 60., Tel.: +36-1 / 209-1143, www.thuasne.hu, www.med-pont.hu.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!