



THUASNE®

Biflex Self Adjust

SINCE 1932

Állítható kompressziós rendszer
a felső és az alsó végtagokra

[] **KOMPRESSZIÓ
KONTROLL**

Thuasne Hungary Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel: +36 1 209 1143

E-mail: thuasne@thuasne.hu

www.thuasne.hu

www.med-pont.hu

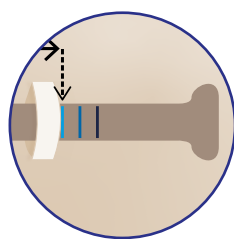


Biflex Self Adjust

Állítható kompressziós eszköz a felső és az alsó végtagokra

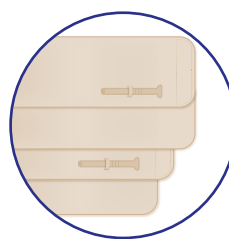
Használata javasolt vénás, nyirokeredetű vagy sérülés által okozott ödéma kezelésére, valamint a krónikus vénás elégtelenség és a lipödéma tüneti kezelésére.

Biztosítja a legalább 20–40 Hgmm nyomásszintet az alsó végtagon és a 20–30 Hgmm nyomásszintet a felső végtagon, valamint lehetővé teszi az eszköz azonos nyomáserősségre történő újbóli beállítását.*



Integrált rendszer a nyomáserősség szabályozására az alsó végtagon (lábszár és comb eszközökön).

Befedi a teljes végtagot az ödéma továbbterjedésének megakadályozása érdekében.



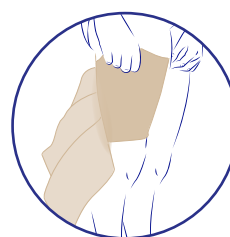
A pántok átfedik egymást, ellentétes irányú rögzítéssel.

Az anyag biztosítja a nedvességelvezetést**



Nyitott cellás habszivacs belső réteg.

Könnyű fel- és levétel



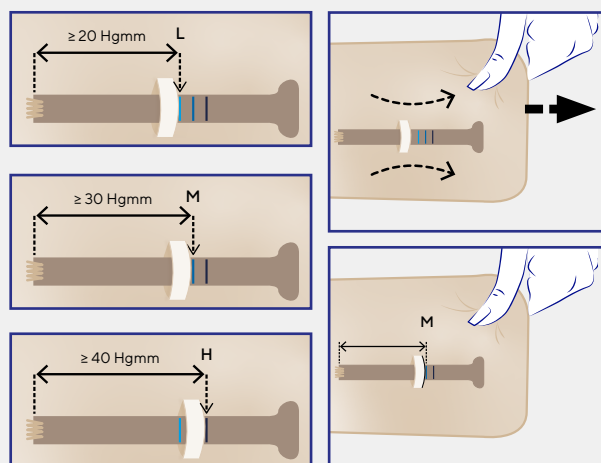
Integrált körharisnya a vádli, a comb és a kar bebújtatásához.

Hogyan kell használni a nyomáserősség szabályozót?

A szabályozóval 3 nyomásszintet lehet beállítani: **L** alacsony (világoskék vonal), **M** közepes (kék vonal) és **H** magas (sötétkék vonal).

A nyomást a pánt meghúzásával lehet beállítani, a pánt megfeszítések addig kell csúszni hagyni a beállító fület, amíg el nem érjük a beállítani kívánt nyomáserősséget. Az eszköz felvételekor és a viselés során ügyeljen arra, hogy ne legyenek rajta nagyobb gyűrődések.

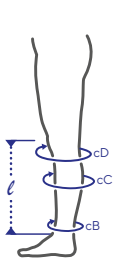
Szükség esetén egy-egy szakasz nyomáserőssége a pántok alulról felfelé történő állításával módosítható.



* Vizsgálati eljárás és eredmények – nyomásbeállítás, belső kutatás-fejlesztés 2022. november
** Légáteresztő teszt IFTH 2023. január

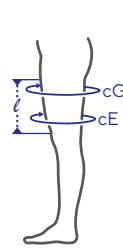
Vádli

ℓ	Boka-térd távolság
cB	Bokakörméret (a legkeskenyebb ponton)
cC	Vádlíkörméret (a legszélesebb ponton)
cD	Körméret a térd alatt
N	Hosszúság: Normál - l < 36 cm/ 14"
L	Hosszúság: Hosszú - l > 36 cm/ 14"

		cB	cC	cD
	1	16 - 24 cm 6.5 - 9.5"	24 - 35 cm 9.5 - 14"	25 - 36 cm 10 - 14"
	2	20 - 28 cm 8 - 11"	32 - 43 cm 12.5 - 17"	32 - 43 cm 12.5 - 17"
	3	24 - 32 cm 9.5 - 12.5"	40 - 51 cm 15.5 - 20"	39 - 50 cm 15.5 - 19.5"
	4	28 - 36 cm 11 - 14"	48 - 59 cm 19 - 23"	46 - 57 cm 18 - 22.5"

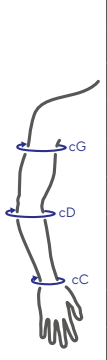
Comb

ℓ	Térd-comb távolság
cE	Körméret a térd felett
cG	Körméret a comb felső részén (a legszélesebb ponton)
N	Hosszúság: Normál - l < 36 cm/ 14"
L	Hosszúság: Hosszú - l > 36 cm/ 14"

		cE	cG
	1	34 - 45 cm 13.5 - 18"	46 - 57 cm 18 - 22.5"
	2	41 - 53 cm 16 - 21"	53 - 65 cm 21 - 25.5"
	3	49 - 60 cm 19.5 - 23.5"	61 - 72 cm 24 - 28.5"
	4	56 - 68 cm 22 - 27"	68 - 80 cm 26.5 - 31.5"

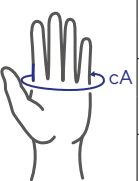
Kar

cG	A kar hónaljban mért körmérete
cD	Alkarkörméret (legszélesebb ponton)
cC	Csukló körméret

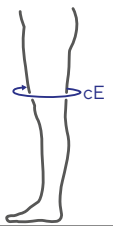
		cG	cD	cC
	1	25 - 32 cm 10 - 12.5"	22 - 28 cm 9 - 11"	15 - 19 cm 6 - 7.5"
	2	29 - 36 cm 11.5 - 14"	24 - 30 cm 9.5 - 12"	16 - 20 cm 6.5 - 8"
	3	33 - 40 cm 13 - 15.5"	26 - 32 cm 10 - 12.5"	17 - 21 cm 6.5 - 8"
	4	37 - 44 cm 14.5 - 17.5"	28 - 34 cm 11 - 13.5"	17 - 21 cm 6.5 - 8"
	5	41 - 48 cm 16 - 19"	30 - 36 cm 12 - 14"	18 - 22 cm 7 - 8.5"
	6	45 - 52 cm 18 - 20.5"	31 - 37 cm 12.5 - 14.5"	19 - 23 cm 7.5 - 9"

Kéz

cA	Kézkörméret
----	-------------

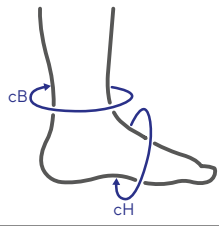
		cA
	1	14 - 19 cm 5.5 - 7.5"
	2	19 - 24 cm 7.5 - 9.5"
	3	24 - 29 cm 9.5 - 11.5"

Térd

		cE
	1	35 - 50 cm 14 - 19.5"
	2	50 - 65 cm 19.5 - 25.5"
	3	65 - 85 cm 25.5 - 33.5"

cE	Körméret a térd felett
----	------------------------

Lábfej

		cB	cH
	1	< 36 cm < 14"	19 - 24 cm 7.5 - 9.5"
	2	< 36 cm < 14"	24 - 29 cm 9.5 - 11.5"
	3	< 41 cm < 16"	29 - 34 cm 11.5 - 13.5"

cB	Bokakörméret
cH	Lábfejkörméret

Kiegészítő termékek:

A BŐR VÉDELME ÉRDEKÉBEN



PAMUT PÓLYA

Cső kialakítás

Anyagösszetétel: 100% pamut.



Szélesség	Hossz	Szín	Cikkszám
11 cm	4 m	fehér	0101010114 0000



ALÁBÉLELŐ TÉRDHARISNYA

Puha tapintású, rugalmas és kényelmesen viselhető a lábszár eszközzel együtt.⁽²⁾

Egy méretben kapható.

Anyagösszetétel: poliamid, elasztán

Cikkszám: 31117 9011292 1

AZ ANATÓMIAI FELSZÍNI EGYENETLENSÉGEK KIEGYENLÍTÉSÉRE / A HELYI NYOMÁS FOKOZÁSÁRA



VARICO

Latex habpárna

A nyitott cellás habnak köszönhetően légáteresztő, így segít megelőzni a sebmacerációt.⁽¹⁾



HABKÖTSZER

Emulgeált latexhab

A pólya oldalszéleinek ferde kialakítása lehetővé teszi a pólya átfedéses felhelyezését anélkül, hogy az átlapolások miatt a kötés túl vastagga válna.⁽¹⁾

A nyitott cellás habszerkezetnek köszönhetően légáteresztő, és segíti a sebmaceráció megelőzését.⁽¹⁾

Modell	Méret	Kiszerezés	Cikkszám
0	63 mm x 87 mm	x 2 darab	520009 1000
1	70 mm x 132 mm	x 1 darab	520009 1100
2	125 mm x 164 mm	x 1 darab	520009 1200
3	200 mm x 250 mm	x 1 darab	520009 1300

Vastagság	Szélesség	Hossz	Cikkszám
8 mm	8 cm	1 m	530809 1100
	10 cm		531009 1100
12 mm	10 cm	1 m	541009 1100



ALÁBÉLELŐ TÉRDHARISNYA KOMPRESSZIÓS LÁBFEJJEL

Kompressziós eszköz alatt viselendő. A lábujjaktól a bokáig 20-30 Hgmm kompressziót biztosít, a lábszár részén nem fejt ki kompressziót.

A bőrön puha érzetet nyújt és kényelmes viselet a Biflex Self Adjust vádli kompressziós eszköz alatt.

Anyagösszetétel: poliamid, elasztán, pamut.

Méret	Hossz	Cikkszám
1	Normál hossz < 40cm	3111790121084
2		3111790121107
3		3111790121114
4		3111790121121
1	Hosszú > 40cm	3111790121091
2		3111790121138
3		3111790121145
4		3111790121152

AZ ÖDÉMACSÖKKENTÉS FOKOZÁSÁRA



MOBIDERM® LAPOK

Méret	Megnevezés	Cikkszám
25 cm x 25 cm	Kis blokkok 5 mm x 5 mm	371001 02502501
25 cm x 1 m	Kis blokkok 5 mm x 5 mm	371001 03310001
20 cm x 1 m	Nagy blokkok 15 mm x 15 mm	371001 03310002
21 cm x 25 cm	Nagy blokkok 15 mm x 15 mm	371001 02102502



MOBIDERM® PÓLYÁK

Méret	Megnevezés	Cikkszám
10 cm x 3 m	Kis blokkok 5 mm x 5 mm	372001 01030001
	Nagy blokkok 15 mm x 15 mm	372001 01030002

Mobiderm® nagyméretű blokkok alkalmazása esetén a Biflex Self Adjust eszköz méretének kiválasztásakor átlagosan 8 cm végtagkörfogatonövekedést kell figyelembe venni.



Thuasne - 120, rue Marius AUFAN - 92300 Levallois-Perret - France - www.thuasne.com
Thuasne SAS - SIREN/RCS Nanterre 542 091 186 - Capital 1 950 000 euros - 120, rue Marius AUFAN 92300 Levallois-Perret (France)

Források:

(1) IFTH report n°180798R - (2) Sensory Analysis project CC2405 - 20/06/2024

Az oldalon említett valamennyi termék CE-jelöléssel rendelkezik (a pamut pólya és az alábélelő harisnya kivételével). A Varico és a habkötszer az európai 2017/745 rendelet szerint CE-jelöléssel rendelkezik. Kérjük, a vásárlást megelőzően olvassa el a használati útmutatót és a termékekre vonatkozó ellenjavallatokat.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT.